

Ръководство за потребителя на Bite Healer 10



ДВАЖИНО

- Благодарим ви, че закупите NITECORE! Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате продукта и съгласете инструкциите.
- Това ръководство съдържа важна информация за безопасност и инструкции за работа. Моля, запазете го за бъдещи справки.
- В случай на актуализация, моля, вижте най-новата версия, налична на официалния уебсайт.

Подробности за гаранцията

Всички NITECORE-Продуктите са с гаранция за качество. Всички DOA / дефектен продукт може да бъде заменен за друг чрез местен дистрибутор/дилър в рамките на 14 дни от покупката. След това всички дефектни / неправилно функциониращи NITECORE-Продуктите могат да бъдат ремонтирани безплатно в рамките на 12 месеца от датата на покупка. След 12 месеца се прилага ограничена гаранция, която покрива разходите за труд и поддръжка, но не и разходите за аксесоари или резервни части.

Гарантията ще бъде анулирана, ако

- продукт(ите) е/са разглобени(и), реконструирани(и) и/или модифицирани(и) от неутроновали лица;
 - продукт(ите) е/са повредени(и) поради неправилна употреба.
- За най-актуална информация относно NITECORE-продуктите и услуги, моля, свържете се с местен NITECORE-дистрибутор или изпратете имейли на service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: + 86-20-83862000
FAX: + 86-20-83862723
WEB: info@nitecore.com
www.nitecore.com



Произведено в Китай

Предупреждения

1. Този продукт е презареждаем с USB-C. Моля, използвайте съвместими

захранвания. НЕ използвайте повредени кабели за зареждане.

- Моля, дръжте този продукт далеч от деца и домашни любимци, за да се предотврати случайно поглъщане.
- Този продукт е предназначен само за облекчаване на сърбеж, причинен от ухапвания от комари.
- Този продукт е предназначен за употреба от възрастни над 18 години. Не се препоръчва за деца под 10 години.
- Деца на възраст 10 и повече години или лица с увреждания трябва да използват продукта само под наблюдението на законен настойник.
- НЕ използвайте продукта върху бебета или малки деца, за да предотвратите изгаряния.
- НЕ използвайте продукта, ако имате кожни заболявания (напр. екзема или инфекциозен дерматит) или чувствителност към топлина.
- НЕ използвайте продукта върху наранена, разранена или възпалена кожа, или върху области с тежки алергични реакции, тъй като това може да изостри симптомите или да причини инфекция.
- Да се използва с повишено внимание при пациенти с гърчове или анамнеза за келониди. Препоръчва се тест върху малка част от кожата преди редовна употреба.
- Потърсете предварително медицинска помощ, ако използвате този продукт по време на

бременност.

- Да се използва с повишено внимание или под наблюдение при пациенти със сериозни нарушения, причинени от метаболитни нарушения (напр. захарен диабет, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, дисфункция на щитовидната жлеза или невроимунни нарушения).
- Препоръчва се обичайният режим за първа употреба върху малък, нечувствителен участък от кожата, за да се провери за дискомфорт или алергични реакции. Спрете употребата на продукта, ако се появи зачервяване, подуване или други необичайни реакции.
- Следете внимателно кожата си по време на употреба. Спрете употребата на продукта и изплатете засенчната област с течаща вода, ако се появят никакви необичайни симптоми, които продължават (напр. силно зачервяване, засилил сърбеж, усещане за парене или алергични реакции). Потърсете медицинска помощ, ако е необходимо.
- НЕ използвайте продукта върху лице, близо до очите или други чувствителни и деликатни зони на кожата.
- НЕ преизползвайте с употребата на продукта. Препоръчително е да не се използва последователно върху една и съща област на кожата повече от 5 пъти на час и да се остави интервал от поне 2 минути между всяко приложение, за да се избегнат изгаряния или алергични реакции.
- НЕ дракчайте кожата по време на употреба, за да избегнете по-нататъшно дразнене и потенциално увреждане на кожата.
- Този продукт може да причини временно локализирано зачервяване, топлина или леко парене, което обикновено отшумява в рамките на няколко минути.
- Този продукт е предназначен само за по-честа употреба. НЕ го прилагайте върху животно като кучета или котки.
- НЕ използвайте продукта върху запалени или експлозивни материали, тъй като високата температура може да доведе до запалване или експлозия.
- Този продукт не е заместител на медицински съвет или лечение. Моля, потърсете незабавно медицинска помощ, ако дискомфортът или симптомите продължават след употреба.
- НЕ поставяйте продукта на вода. Моля, подгответе го добре преди употреба.

- НЕ поставяйте чужди тела в порта за зареждане.
- НЕ излагайте продукта на температури над 60°C (140°F) за продължителен период от време, тъй като това може да причини експлозия или запалване на батерията.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте този продукт, тъй като това ще го повреди и ще направи гаранцията на продукта невалидна.

Безопасност на батерията


Неправилната употреба на устройства с вградени литиево-йонни батерии може

да доведе до сериозни повреди на батерията или рискове за безопасността, като например запалване или експлозия. НЕ използвайте устройството, ако е повредено. НЕ разглобявайте, не пробивайте, не счаквайте и не изгаряйте устройството. Ако забележите теч или необичайна миризма, незабавно спрете да използвате устройството. Изхвърляйте устройството/батериите в съответствие с приложимите местни закони и разпоредби.


Технически данни

Капацитет	130mAh
Работно време	Приблизително 100 пъти с около пълно зареждане
Температура на нагряване	Режим с висока проводимост: 50°C Нормален режим: 45°C
Размери	60,0 mm x 16,0 mm x 16,0 mm
Тегло	12 г ± 2 г / 0,42 унции ± 0,07 унции (аксесоарът не е включен)
Аксесоар	Кабелът е в комплект
IP рейтинг	IP54

Преглед на продукта

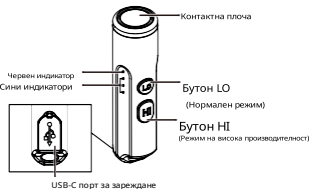

Функция за зареждане

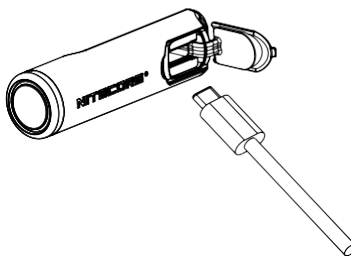

(Български)

Функция за зареждане

Продуктът е оборудван с интелигентна система за зареждане. Моля, заредете продукта преди първата употреба.

Зареждане: Като е показано, използвайте USB кабел за зареждане, за да съхраните външно зареждане (напр. адаптер, power bank или други зарядни устройства) към порта за зареждане на продукта, за да започнете процеса на зареждане.

- По време на процеса на зареждане, сините индикатори постепенно ще преминат от мигане към постоянна светлина, едни по едни, показвайки нивото на батерията.
- Когато продуктът е напълно зареден, 3-те сини индикатора ще светят постоянно.
- Времето за зареждане е приблизително 1 час и 40 минути (заредете се чрез адаптер 5V/1A).

При пълно зареждане, времето в режим на готовност е около 12 месеца.

Инструкции за експлоатация

Продуктът разполага с две температурни настройки. Моля, изберете подходящата настройка във основа на състоянието на кожата ви.

1. Кратко облекчаване на сърбеж

Натиснете и задръжте бутон H / бутон LO, докато червеният индикатор

започне да свети постоянно. Освободете бутон и поставете контактната плоча върху мястото на ухапване от комар. След 3 секунди червеният индикатор ще изключи автоматично, което показва, че продуктът е изключен.

2. Продължително облекчаване на сърбеж

Натиснете и задръжте бутон H / бутон LO. Дори след като червеният индикатор започне да свети постоянно, продължете да държите бутон натиснат, докато синият(ите) индикатор(и) не светне(т). Освободете го и поставете контактната плоча върху мястото на ухапване от комар. (Продуктът има три сини индикатора. Всички активирани сини индикатори показват допълнителна секунда от продължителността на облекчението.)

- Когато е включен 1 син индикатор, продължителността на облекчението е 4 секунди.
- Когато са включени 2 сини индикатора, продължителността на облекчението е 5 секунди.
- Когато са включени 3 сини индикатора, продължителността на облекчението е 6 секунди (максимална продължителност).

Забележка: Ако и трите сини индикатора светят и бутонът продължи да бъде натиснат, червеният и синият индикатор ще се изключат едновременно и продуктът ще се изключи автоматично.

Индикация за захранване

Натиснете кратко бутон H / бутон LO и съответните сини индикатори ще се включат последователно, за да покажат оставяща заряд на батерията.

Състояние на индикаторите	Ниво на мощност
3 Постоянно включен	75%-100%
2 Постоянно включен	35%-75%
1 Постоянно включен	5%-35%
1 Мигане	0%-5% (Моля, презаредете продукта възможно най-скоро)



Официален вносител за България:
10x Trade ЕООД

София 1750
ул. "Петър Протич", бп. 31
тел. 02 971 45 00
www.asstle.bg